

# 化粧水の動的接触角 (前進角)測定




SUSCARE


## 1. 測定条件

拡張/収縮法を用いて、人工皮膚モデル上での化粧水A、Bの動的接触角(前進角)を計測した。

## 2. 測定結果

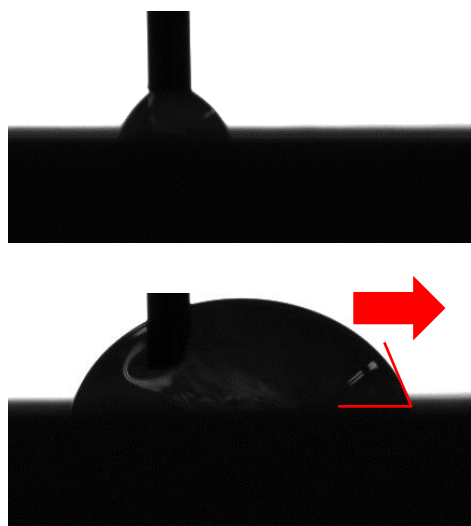

動的接触角(前進角)の測定

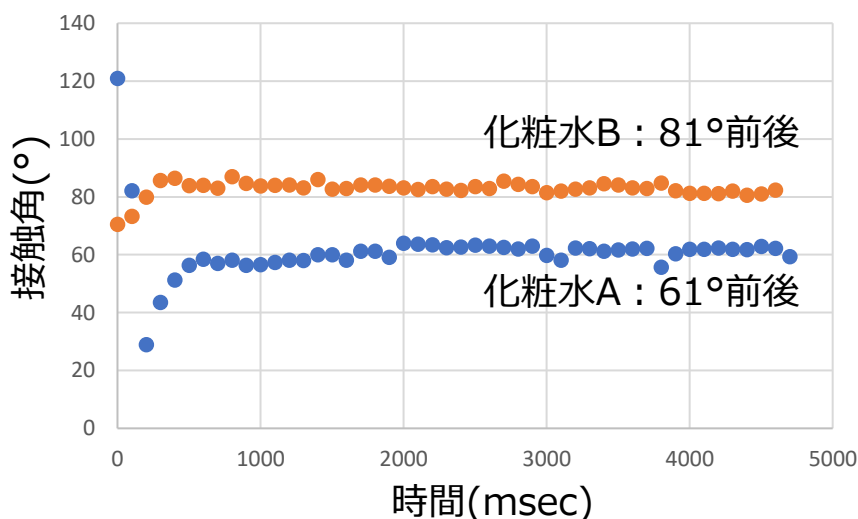

## 3. 測定結果から得られる情報

動的接触角(前進角)は、液体が濡れ拡がるときの接触角を示しています。動的接触角が低いほど、肌上で広がりやすいため、化粧水Aの方がより肌になじみやすいことが期待できます。表面張力等の物理的特性の測定やモニター試験等と組み合わせることにより、化粧品の使用感の評価につながります。

## 4. 使用機器/利用料金

中小企業：自動接触角計/1,170円/時間

一般企業：自動接触角計/2,350円/時間

※あくまで参考価格です。試験内容によって料金は変わりますことご了承下さい。  
ご不明な点等ありましたら[お問い合わせ](#)ください。